

Mode d'emploi Enfile-bas de BELSANA

(pour pointe fermée et pointe ouverte)

Préparez :

- Vos bas de compression médicale
- L'enfile-bas de BELSANA
- Nous vous recommandons d'utiliser les gants en caoutchouc de BELSANA, spécialement conçus pour faciliter l'enfilage et pour protéger vos bas.



1^{ère} étape : Préparez l'enfile-bas



L'enfile-bas de BELSANA est composé de deux éléments :


- l'enfile-bas en nylon bleu
- une tige souple de fixation

Sortez tout de l'emballage et dépliez l'enfile-bas.



Ensuite pliez-le en superposant les trous.

Enfilez en zigzag la tige bleue, en commençant par le côté large, afin de réunir les deux faces.

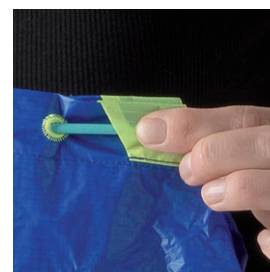

Important :

Positionnez le bout de la tige bleue dans la petite pochette, prévue à cet effet.

2^{ème} étape : Mettez l'enfile-bas



Faites glisser le pied dans l'enfile-bas.

La tige bleue se trouve sous votre pied et la languette noire sur le cou-de-pied.

3^{ème} étape : Faites glisser le bas sur l'enfile-bas



Faites glisser le bas à l'aide de vos deux mains, comme si vous enfileriez une botte (il ne faut en aucun cas enrouler le bas).

Positionnez bien le bas des orteils jusqu'au talon. Le reste du bas se trouve à la hauteur de la cheville.


4^{ème} étape : Retirez l'enfile-bas



Retirez tout d'abord la tige bleue. Prenez ensuite la languette noire avec vos deux mains et en tirant dessus, sortez l'enfile-bas de votre bas de compression médicale.

(Pour le bas à pointe ouverte, il est indispensable de tenir la bordure de la pointe ouverte en retirant l'enfile-bas)

5^{ème} étape : La mise en place

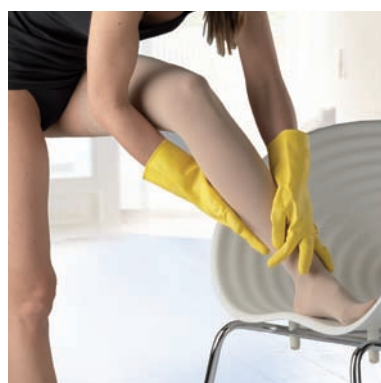

Maintenant vous pouvez ajuster sans effort le bas sur toute la jambe jusqu'à ce que tous les plis disparaissent.

Seuls des bas de compression médicale bien adaptés et bien positionnés pourront garantir les résultats bénéfiques souhaités tout en étant confortables.